

## Autotest de dépistage rapide de la COVID-19 à domicile, de Roche

### À noter :


Pour obtenir des résultats précis, il est important de bien suivre les instructions.

### L'autotest contient :

1. Un sachet dessiccant (ne pas utiliser l'autotest si les perles sont vertes)
2. Un écouvillon nasal
3. Un tube
4. Un capuchon distributeur
5. Un dispositif d'analyse

### Vous devez avoir ce qui suit :

- ✓ Surface propre
- ✓ Essuie-tout
- ✓ Désinfectant pour les mains
- ✓ Minuterie ou horloge

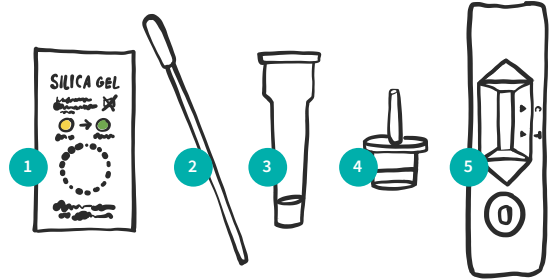

Adapté de la notice du produit de Roche — Mis à jour le 10 mars 2022


### Avant de commencer :

- ✓ Lavez-vous les mains.
- ✓ Placez une serviette en papier sur une surface propre et plane.
- ✓ Ouvrez le contenu de la trousse d'autotest.
- ✓ Placez le tube dans le support de manière à ce qu'il soit droit.
- ✓ Si plusieurs personnes font l'autotest, écrivez votre nom sur le dispositif avec un marqueur ou un stylo.

Utilisez ce code QR pour voir la vidéo d'instruction : [testtoprotect.ca/biosensor](https://testtoprotect.ca/biosensor)




1

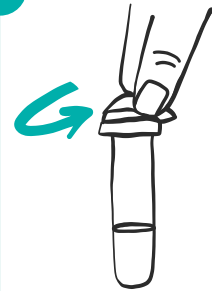

Retirez la pellicule du tube en faisant attention à ne pas renverser le liquide.

Placez le tube dans le trou du support, sur la partie supérieure de la boîte.

2

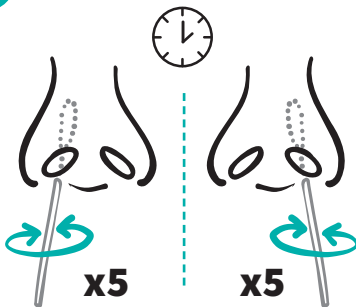


Insérez l'écouvillon dans votre narine à environ 2 cm (pour les petits enfants, mettez simplement l'écouvillon dans la narine).

Frottez et faites pivoter l'écouvillon vigoureusement 5 fois, pendant au moins 15 secondes.


Faites la même chose dans l'autre narine avec le même écouvillon (vos yeux peuvent larmoyer).

3

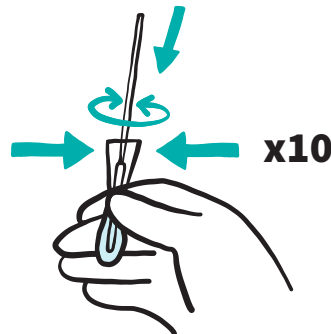

Placez l'écouvillon soigneusement dans le tube de liquide puis remuez l'écouvillon dans le liquide au moins 10 fois tout en serrant le tube.

4

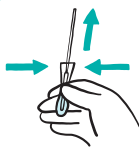

a




b

Débarrassez l'écouvillon du liquide en pinçant le tube et en retirant lentement l'écouvillon (a). **Jetez l'écouvillon.**

Refermez le tube à l'aide du capuchon distributeur (b) puis renversez-le pour déposer 4 gouttes sur la zone du dispositif d'analyse (c). **ATTENTION** : Les gouttes sortent rapidement.

Laissez le dispositif d'analyse sur une surface plane pendant 15 minutes (d).

Après 30 minutes, les résultats peuvent être incorrects.

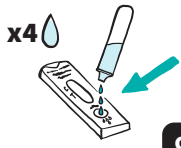

c



d

5




Une fois terminé, conservez le support de tube et jetez le reste. Désinfectez-vous les mains puis nettoyez la surface.



La zone qui affiche les résultats deviendra rouge avant de redevenir blanche quand il sera temps de lire le résultat.

## RÉSULTATS (APRÈS 15-30 MINUTES)

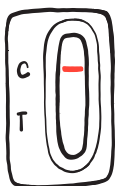


### NÉGATIF — UNE LIGNE

Une ligne à la ligne C (ligne de contrôle), pas de ligne à la ligne T (ligne de test)

Veillez noter :

- ✓ Un seul résultat négatif ne permet pas d'exclure la COVID-19 chez une personne présentant des symptômes.
- ✓ Restez à la maison si vous êtes malade et répétez le test dans les 48 heures.

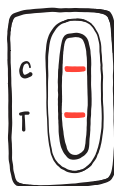

### POSITIF — DEUX LIGNES

Une ligne à la ligne C (ligne de contrôle), une ligne à la ligne T (ligne de test)

Si votre test est positif, vous avez la possibilité de confirmer votre résultat positif au test rapide par un test PCR. Pour prendre rendez-vous, veuillez remplir l'évaluation en ligne à [covid-self-assessment.novascotia.ca/fr](https://covid-self-assessment.novascotia.ca/fr) ou appelez le 811.

Que vous choisissiez ou non de faire un test PCR de confirmation, vous devez suivre les instructions suivantes :

- ✓ Isolez-vous immédiatement.
- ✓ Avisez la Santé publique de votre résultat positif au test rapide en remplissant le formulaire de déclaration et de soutien [c19hc.nshealth.ca/self-report](https://c19hc.nshealth.ca/self-report) ou composez le 1-833-797-7772 si vous n'avez pas accès à Internet ou si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire. Ce questionnaire est utilisé pour identifier les personnes qui sont admissibles et qui bénéficieraient d'un accès rapide aux médicaments contre la COVID-19.
- ✓ Considérez-vous comme un cas contagieux de COVID-19 et rendez-vous à [nshealth.ca/testedpositiveforcovid](https://nshealth.ca/testedpositiveforcovid) pour obtenir plus d'information sur ce que vous et votre entourage devez faire.

Merci  
d'avoir fait le test!

RÉSULTAT INVALIDE — Si votre test ne correspond pas aux exemples de résultats négatifs ou positifs, le test doit être répété avec une nouvelle trousse.

Garder la trousse de test hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas boire le liquide du test.