

BD Veritor

Test rapide de dépistage
de la COVID-19
à la maison

REMARQUE :


Il est important de suivre
attentivement les instructions
pour obtenir des résultats précis.

Votre trousse de test comprend :

1. Écouvillon nasal
2. Tube contenant une petite quantité de liquide transparent
3. Dispositif de test

Vous aurez besoin de :

- ✓ Surface propre et plane
- ✓ Désinfectant pour les mains
- ✓ Serviette de papier
- ✓ Minuteur ou horloge

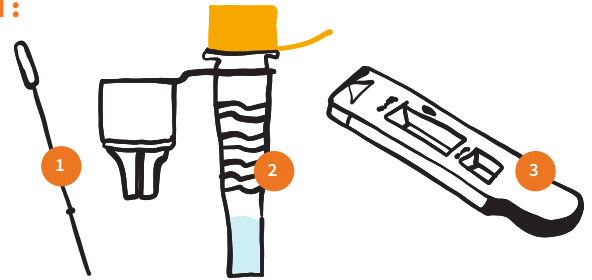

Adapté de la notice du produit BD Veritor — Mis à jour le 28 juin 2022

Ne pas manger ni boire pendant au moins 30 minutes avant de passer le test.

Avant de commencer :

- ✓ Nettoyez vos mains.
- ✓ Placez une serviette de papier sur une surface propre et plane.
- ✓ Ouvrez le contenu de votre trousse de test.
- ✓ Retirez le dispositif de test de l'emballage.
- ✓ Écrivez votre nom avec un marqueur ou un crayon sur le dispositif si vous testez plus d'une personne.

Scannez ce code QR pour obtenir
une vidéo d'instructions :
testtoprotect.ca/veritor



REMARQUE :

Pour que le test soit plus précis,
nous vous recommandons
d'effectuer un écouvillonnage
de la gorge et des narines à
l'aide du même écouvillon.
Si vous choisissez de faire
le prélèvement à un seul
endroit, vous devez le faire
dans les narines (à lui seul, le
prélèvement dans la gorge ne
donnera pas de résultats précis).

1



Penchez votre tête
en arrière et ouvrez
votre bouche. Sans
toucher les côtés
de votre bouche ou
votre langue, utilisez
l'écouvillon pour
frotter l'arrière de
votre gorge (zone
ombragée en noir sur
l'illustration) 5 fois
d'avant en arrière
(vous pourriez avoir
la sensation d'être sur
le point de vomir).

2



En utilisant le même écouvillon,
insérez l'écouvillon dans la narine à
environ 2 cm (0,5 p). (Pour les enfants
en bas âge, insérez simplement
l'écouvillon dans la narine).

Frottez et faites tourner l'écouvillon
vigoureusement 5 fois.

Répétez l'opération pour l'autre
narine en utilisant le même
écouvillon (il est possible que
vos yeux coulent).


3



Tapotez doucement le
tube pour faire descendre
le liquide au fond.

Retirez délicatement le bouchon
JAUNE, en faisant attention à ne
pas renverser, éclabousser ou
entrer en contact avec le liquide.

4

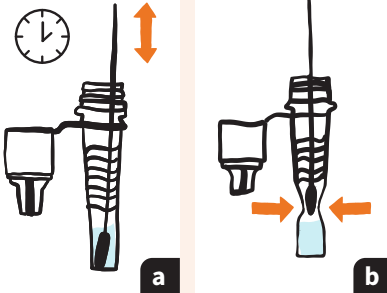


Descendez délicatement
l'écouvillon dans le liquide,
en remuant de haut en bas
pendant 15 secondes.

Pressez le tube sur
l'écouvillon pour retirer
le liquide restant.

Jetez l'écouvillon.

5

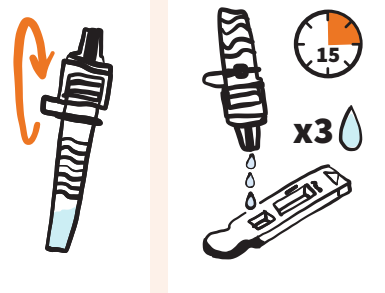

Mettez le bouchon
attaché sur le tube.

Pressez délicatement
3 gouttes dans le petit
puits du dispositif de
test. Laissez le dispositif
sur une surface plane
pendant 15 minutes.

6

Une fois le test terminé, mettez les fournitures de test à la poubelle, désinfectez-vous les mains et nettoyez l'espace de test.



ATTENTION : La zone qui affiche les résultats deviendra rouge puis redeviendra blanche avant que la ligne de résultat apparaisse.

RÉSULTATS (APRÈS 15 MINUTES)




NÉGATIF — UNE LIGNE

Une ligne à la ligne C (ligne de contrôle),
pas de ligne à la ligne T (ligne de test)

Veillez noter :

- ✓ Si vous avez des symptômes, un seul résultat négatif ne peut pas être utilisé pour exclure la COVID-19. Refaites un test dans 48 heures (2 jours).
- ✓ Restez à la maison si vous vous sentez malade.

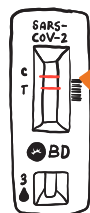

POSITIF — DEUX LIGNES

Une ligne à la ligne C (ligne de contrôle),
une ligne à la ligne T (ligne de test)

Si votre test est positif et que vous êtes une personne considérée comme présentant un risque élevé de maladie grave, vous avez la possibilité de confirmer votre résultat positif au test rapide au moyen d'un test PCR. Pour prendre rendez-vous, veuillez remplir l'évaluation en ligne à covid covid-self-assessment.novascotia.ca/fr ou appelez le 811.

Si vous obtenez un résultat positif au test rapide :

- ✓ Restez à la maison si vous vous sentez malade.
- ✓ Avisez Santé Nouvelle-Écosse de votre résultat positif au test rapide en remplissant le formulaire de dépistage – Déclaration et soutien à c19hc.nshealth.ca/self-report (en anglais seulement) ou appelez au 1 833-797-7772 si vous n'avez pas accès à Internet ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir. Ce formulaire permet d'identifier les personnes qui sont admissibles et qui pourraient bénéficier d'un accès rapide aux médicaments contre la COVID-19.
- ✓ Considérez-vous comme un cas contagieux de COVID-19 et visitez nshealth.ca/testedpositiveforcovid (en anglais seulement) pour obtenir plus d'information sur ce que vous devez faire.

RÉSULTAT INVALIDE — Si votre test ne correspond pas aux exemples de résultats négatifs ou positifs, le test doit être répété avec une nouvelle trousse.

Garder la trousse de test hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas boire le liquide du test.