

LUCIRA CHECK-IT
Test moléculaire rapide
de dépistage de la
COVID-19 à la maison

REMARQUE :


Il est important de suivre attentivement les instructions pour obtenir des résultats précis.

Votre trousse de test comprend :

1. Écouvillon nasal
2. Tube contenant une petite quantité de liquide mauve
3. Dispositif de test
4. Deux piles AA

Vous aurez besoin de :

- ✓ Surface propre et plane
*Le dispositif ne doit pas être déplacé pendant le test de 30 minutes.
- ✓ Serviette de papier
- ✓ Désinfectant pour les mains

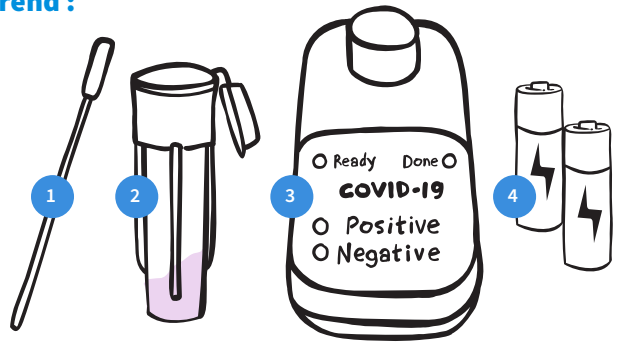

Adapté de la notice du produit Lucira CHECK-IT — Mis à jour le 28 juin 2022

Avant de commencer :

- ✓ Nettoyez vos mains.
- ✓ Placez une serviette de papier sur une surface propre et plane.
- ✓ Ouvrez le contenu de votre trousse de test.
- ✓ Ouvrez le compartiment à piles et n'insérez les piles que lorsque vous êtes prêt à utiliser le test. **Assurez-vous que le voyant READY (prêt) est allumé.**
- ✓ Écrivez votre nom avec un marqueur ou un crayon sur le dispositif si vous testez plus d'une personne.

Scannez ce code QR pour obtenir une vidéo d'instructions : testtoprotect.ca/lucira




1



Retirez le sceau du tube d'échantillon, en faisant attention à ne pas renverser le liquide mauve, puis placez délicatement le tube dans le dispositif de test sans le pousser au fond.

Le voyant **READY** devrait être allumé.


2

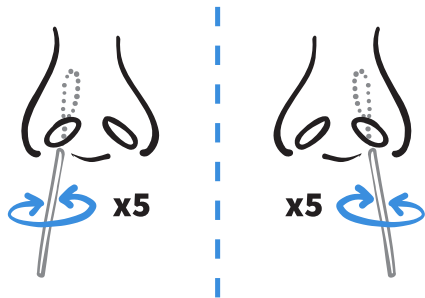

Insérez l'écouvillon dans la narine à environ 2 cm (0,5 p.). (en ce qui concerne les enfants en bas âge, insérez simplement l'écouvillon dans la narine)

Frottez et faites tourner l'écouvillon vigoureusement 5 fois. Répétez l'opération pour l'autre narine (il est possible que vos yeux coulent).

3

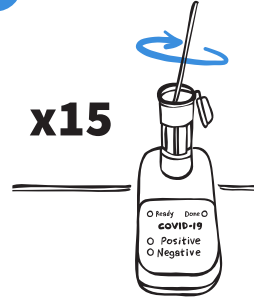


Tout en maintenant le dispositif de test stable sur une surface plane (pour éviter tout déversement), descendez doucement l'écouvillon dans le liquide mauve du tube d'échantillon jusqu'à ce qu'il touche le fond du tube.

Mélangez l'échantillon au liquide en le remuant 15 fois.

Jetez l'écouvillon.

4

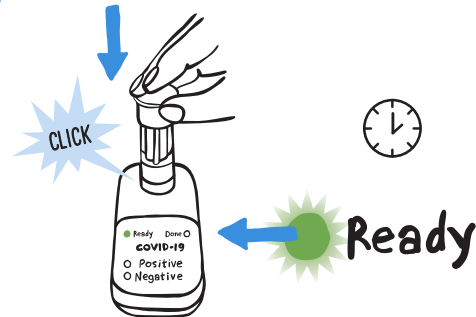


Fermez le bouchon du tube d'échantillon et enfoncez le tube dans le dispositif de test jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Le voyant **READY** se mettra à clignoter, signalant que le test est en cours.

Si le voyant **READY** ne se met pas à clignoter dans les 5 secondes, utilisez la paume de votre main pour pousser fermement le tube dans le dispositif de test.

5

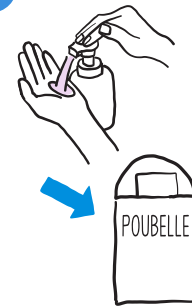

Une fois le test terminé, mettez les fournitures de test à la poubelle, désinfectez-vous les mains et nettoyez l'espace de test.

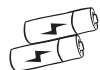

Une fois le test terminé, les piles peuvent être retirées et réutilisées, ou éliminées comme il se doit.

RÉSULTATS (APRÈS 30 MINUTES) (OU PLUS RAPIDEMENT EN CAS DE RÉSULTAT POSITIF)



RÉSULTAT NÉGATIF

Les voyants **Done (terminé)** et **Negative (négatif)** sont tous les deux allumés.

Veuillez noter :

- ✓ Si vous avez des symptômes, un seul résultat négatif ne peut pas être utilisé pour exclure la COVID-19. Refaites un test dans 48 heures (2 jours).
- ✓ Restez à la maison si vous vous sentez malade.



RÉSULTAT POSITIF

Les voyants **Done (terminé)** et **Positive (positif)** sont tous les deux allumés.

Si votre test est positif et que vous êtes une personne considérée comme présentant un risque élevé de maladie grave, vous avez la possibilité de confirmer votre résultat positif au test rapide au moyen d'un test PCR. Pour prendre rendez-vous, veuillez remplir l'évaluation en ligne à covid-self-assessment.novascotia.ca/fr ou appelez le **811**.

Si vous obtenez un résultat positif au test rapide :

- ✓ Restez à la maison si vous vous sentez malade.
- ✓ Avisez Santé Nouvelle-Écosse de votre résultat positif au test rapide en remplissant le formulaire de dépistage – Déclaration et soutien à c19hc.nshealth.ca/self-report (en anglais seulement) ou appelez au **1 833-797-7772** si vous n'avez pas accès à Internet ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir. Ce formulaire permet d'identifier les personnes qui sont admissibles et qui pourraient bénéficier d'un accès rapide aux médicaments contre la COVID-19.
- ✓ Considérez-vous comme un cas contagieux de COVID-19 et visitez nshealth.ca/testedpositiveforcovid (en anglais seulement) pour obtenir plus d'information sur ce que vous devez faire.

RÉSULTAT INVALIDE — Si votre test ne correspond pas aux exemples de résultats négatifs ou positifs, le test doit être répété avec une nouvelle trousse.

Garder la trousse de test hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas boire le liquide du test.